




VELVET SKIN


Radiofrequenza in Medicina Estetica.



www.topqualitygroup.it

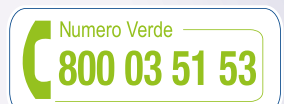

VELVET SKIN

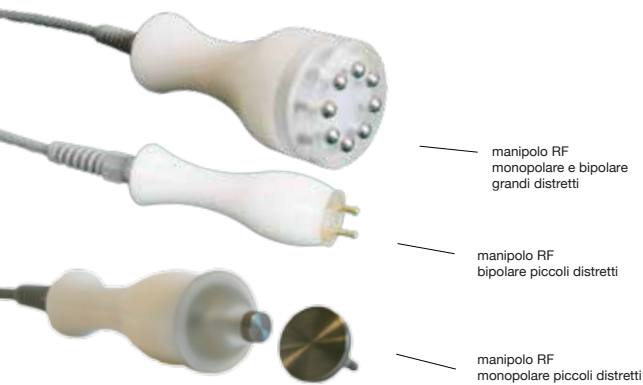

Manipoli radiofrequenza per Medicina Estetica

PLUS:

- Feedback dell'impedenza del distretto in trattamento per l'adattamento dei parametri di terapia alle condizioni individuali del paziente.
- Possibilità di settare via software due frequenze: 500 kHz per patologie a maggior profondità e 1 MHz per patologie più superficiali.
- Possibilità di settare via software la modalità monopolare o bipolare grandi distretti senza cambiare i manipoli.
- Possibilità di settare via software la modalità capacitiva o resistiva senza cambiare i manipoli.
- Manipoli capacitivi senza vernice epossidica.
- Programmi preimpostati secondo patologie e distretti.
- Tutti i parametri sono visualizzati su un display 10" color touch screen
- Il software è redatto secondo il concetto Friendly Human-Machine Interface [FHMI] per renderlo intuitivo e di agevole utilizzo.

DOTAZIONE:

- N.01 cavo di alimentazione
- N.01 fascia elastica
- N.01 manipolo RF monopolare viso
- N.01 elettrodo viso dim. 10mm
- N.01 elettrodo viso dim. 25mm
- N.01 porta elettrodi viso in plexiglass
- N.01 manipolo RF bipolare viso 2 punte retrattili
- N.01 manipolo RF monopolare e bipolare corpo
- N.01 piastra in acciaio
- N.01 cavi per piastra in acciaio

SPECIFICHE TECNICHE:

Alimentazione 100÷240 V, 50÷60 Hz
Potenza Max assorbita 450 W
Classe di sicurezza elettrica II BF
Grado di protezione IP IP40
Potenza max in uscita RF 150 W @ 50 ohm
Frequenza di emissione RF 500 kHz, 1000 kHz impostabile da software
Tipologia di emissione Capacitiva / Resistiva
Funzioni Monopolare / Bipolare
Display 10.4" colour touch con PC embedded
Temperatura di funzionamento 0÷40 °C
Umidità di funzionamento 30÷75% senza condensa
Dimensioni L 45 x A 96 x P 41 cm
Peso 7 kg



Offrire soluzioni avanzate, APPARECCHIATURE PER L'ESTETICA MEDICALE non invasiva e mini-invasiva della miglior qualità e per ogni specifica esigenza di trattamento: questo è l'obiettivo che Medical Body Point, la divisione medicale di Top Quality Group, persegue grazie alle grandi potenzialità tecniche e attraverso il costante investimento nella Ricerca & Sviluppo di nuove tecnologie quali VELVET SKIN.

RADIOFREQUENZA

Si avvale del principio terapeutico basato sulla somministrazione di calore per un certo periodo di tempo in una regione prestabilita del corpo umano. L'energia calore non si applica dall'esterno ma si provoca la condizione fisica affinché venga generato direttamente sul tessuto target. L'energia biocompatibile ceduta ai substrati biologici esplica la sua azione terapeutica con due effetti sinergici:

- *Innalzamento del potenziale energetico delle membrane cellulari;*
- *Aumento della temperatura profonda (endogena) non per cessione di calore ma per incremento fisiologico indotto*

MEDICINA ESTETICA:

Il calore prodotto induce un riscaldamento profondo del derma, contrae e riallana le fibre di collagene con immediato effetto tensorio, stimolando i fibroblasti a produrre nuovo collagene, elastina e acido ialuronico. Il trattamento rimodella e tonifica i tessuti, andando a migliorare il rilassamento cutaneo e agendo sugli inestetismi. Il dispositivo consente di eseguire trattamenti in modalità resistiva o capacitiva (funzioni impostabili da software senza cambiare i trasduttori) e in configurazione monopolare o bipolare. La configurazione monopolare ha una profondità d'azione elevata. Questa caratteristica permette di avere sia l'effetto di distensione che l'effetto di neoformazione di collagene a tutto spessore. La configurazione bipolare ha una profondità d'azione minore rispetto alla monopolare ed il riscaldamento è prodotto inizialmente in quelle strutture che hanno una minore resistenza al passaggio dell'energia e, successivamente, la propagazione avviene anche alle strutture che oppongono una certa resistenza al riscaldamento per cui le prime molecole raggiunte dall'impulso termico sono quelle più superficiali che determinano una immediata denaturazione delle proteine del collagene, con accorciamento delle stesse (effetto lifting). Per questo motivo la configurazione bipolare è particolarmente adatta a viso, collo e décolleté.

TRATTAMENTI FRUIBILI:

VISO:

- *Effetto lifting su viso, collo e décolleté.*
- *Pelle del viso più compatta, tesa e consistente.*
- *Distensione rughe periorculari e nasolabiali.*
- *Effetti immediati su rilassamenti palpebrali e zampe di gallina.*
- *Idratazione profonda.*

CORPO:

- *Tonificazione generale delle zone trattate*
- *Rassodamento addome, glutei, zona interna braccia e cosce.*
- *Perfetto complemento a trattamenti snellenti e dimagranti.*
- *Idratazione profonda.*

Subito dopo il trattamento si avrà un effetto tensorio. I primi effetti di ricostruzione del tessuto cominceranno da subito, come normalmente avviene quando si ha una stimolazione del tessuto. I risultati persisteranno nel tempo, anche quando saranno terminati i trattamenti.

**Apparecchiatura certificata MEDICAL DEVICE
in conformità alla direttiva 2007/47/CE
correttiva della direttiva 93/42/CE**

PRODOTTO IN ITALIA



Top Quality Group si riserva di variare i dati sopra riportati senza preavviso e, comunque, tali dati non sono validi ai fini contrattuali

Via G. Sorel - Zona Industriale - 06012 Città di Castello, Perugia, Italia
Tel.: +39 075 8520088 / 075 8522216 / 075 8512197 - Fax: +39 075 8674506

www.topqualitygroup.it info@topqualitygroup.it

Registro Produttori AEE n° IT1608000009459

